

Parumo

徘徊傾向のある高齢者のひとり歩きに悩んでいる皆様に朗報です！
どっち君が2になって大幅進化しました。

パルモどっち君2 iSS-115

衛星みちびき対応で位置精度が大幅向上
防水対応！2になってリニューアル新登場！

大幅進化で、今
大評判です！

みちびき対応



パルモどっち君2
iSS-115

専用シューズ



認知症老人徘徊感知機能 福祉用具
貸与対象機能 で市町村によって、
福祉用具レンタル対象になります各
市町村にお問合せ下さい
TAISコード 01570-000031

小さな小さな パルモ どっち君2！

認知症などにより徘徊してしまった高齢者を、GPSで位置情報を取得して地図に表示し、早期発見につながります。衛星みちびきに対応し、位置精度が大幅改善しました。そして、防水は最高レベルのIP68対応。

高齢者のご家族に安心をご提供します。

認知症老人徘徊感知 + 位置情報検索サービス

福祉用具貸与対象機能 市町村によって福祉用具レンタル対象になります TAISコード 01570-000031

パルモ どっち君2



- ◆ iSS-115 仕様
- サイズ (mm) W 38.5 H 47.5 T 11.85
- 重量 約26g (GPS端末のみ)
- 測位方式 GNSS (GPS、みちびき、GLONASS、BeiDou、Galileo)、A-GPS、基地局測位
- 通信回線 LTE回線
- 充電 USB Type C方式
- 防水、防塵 IP68対応
- ブザー 内蔵

位置情報検索 & 地図上に見易く表示




第3者が位置情報を検索できます。ゼンリンの地図の上にピンが立ち、居場所を見易く表示します。履歴がわかるので早期発見に貢献します。パソコン、スマホがご利用頂けます。高精度衛星みちびきに対応し、位置精度が向上しました。

小さくて、どこでもそっと装着



パルモどっち君2は小さいので、高齢者に気付かれないようにそっと装着することが可能です。例えば、靴、衣服、杖、ポーチなどに着けることが可能です。別売りで、靴底に装着する専用靴を用意しています。

エリア通知、タイマー通知

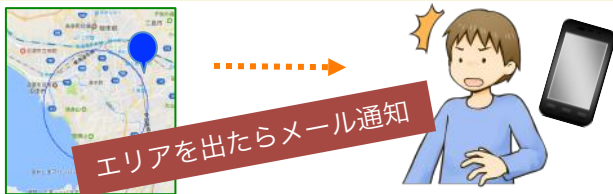

- エリア通知： 中心点と半径を定めたエリアを設定することが可能です。このエリアを出ると、どっち君が作動し、予め設定した相手先に通知メールが届きます。また、エリアの外から中への移動も通知することが可能です。
- タイマー通知： 指定した曜日や、時間に位置情報を予め設定した相手先に通知することが可能です。

振動を感知して、メール通知



パルモどっち君2は、加速度センサーを内蔵し、本体が移動するとその振動を感知します。これをトリガーとして、LEDで表示します。また、予め設定した相手先にメール通知します。(最大5箇所)

◆ 豊富な機能一覧

- 自己位置情報通知 GPS端末のボタンを押下で、メールで位置情報を通知。
- 第三者位置検索 パソコン、スマホから対象のどっち君の位置情報を地図に表示。
- 履歴検索 位置情報履歴を表示します。
- 通知先設定 メール通知の相手先を5箇所設定できます。情報の設定変更可能。
- ブザー鳴動 遠隔より、GPS端末の内蔵ブザーを鳴動できます。
- タイマー通知 指定した曜日や、時間に位置情報を通信できます。
- エリア通知 中心点と半径を定めたエリアの出入(位置情報)を通知可能。
- 振動感知 端末が振動を検知した時に、位置情報を通知することが可能。
- 電池量低下通知 電池残量が低下した場合、通知することができます。

専用シューズ ■ 2タイプの靴をご用意

- 1) ブラックタイプ
- 2) ブラウンタイプ

